


Кальций (Calcium ASX)

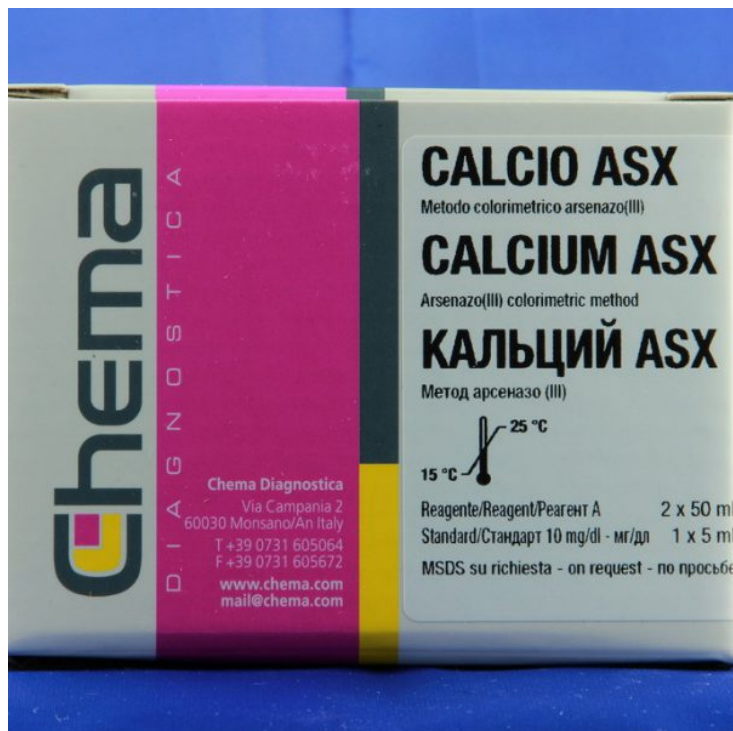

Product Categories: [Водно-электролитный обмен](#), [Диагностические наборы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/vodno-elektrolitnyj-obmen/kalcij-calcium-asx/>

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Кальция в сыворотке, плазме и моче.

Кат.№	Фасовка набора
САа F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
САа F500 VL	500 мл (4x125 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Кальций (Calcium ASX)

Метод с Arsenazo III, колориметрический,

В слабо-кислой среде Арсеназо (III) взаимодействует с Са образуя комплекс

Измерение по конечной точке: Арсеназо (III)+Са ? Комплекс

Монореагент/жидкий

Линейность - 20 мг/дл (5 ммоль/л)

Чувствительность - 0,2 мг/дл

660 нм (650-660) Абсорбция: ?Комплекс, наблюдаемый синий цвет

Стандарт 10 мг/дл (2,50 ммоль/л)

Общий срок годности набора - 4 года

Температура хранения набора 15-25°C

Product data have been exported from - [ВЛ-Медиа](#)

Export date: Fri Nov 29 1:40:07 2024 / +0000 GMT

Анализируемый образец: сыворотка (предпочтительно), гепарин-плазма, моча 1:2

* Антикоагулянты: цитрат, оксалат и ЭДТА не должны использоваться.